


# CATHCUP®

## Colector de orina en forma de embudo para uso en pacientes masculinos

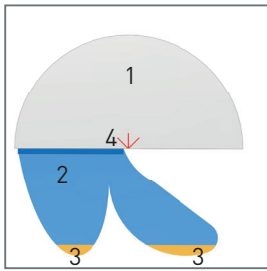

**Anotación:**

Los colores en las imágenes del producto que se enumeran aquí solo se utilizan para describir mejor los pasos de la aplicación. El producto en sí es blanco.


**Descripción del producto**

- (1) La almohadilla eXsorb® forma la superficie del embudo absorbente. Esto está en un lado con una lámina. – para evitar fugas de líquido - recubierto.
- (2) La superficie adhesiva está recubierta con una película removible. Después de que se haya despegado la película, la superficie se puede pegar a la almohadilla eXsorb® y al catéter para colocar la CathCup®.
- (3) Ambos extremos de la superficie adhesiva no son adhesivos para que sea más fácil despegar la película para la fijación y para que sea más fácil quitar la CathCup®.
- (4) Las tres perforaciones de la almohadilla eXsorb® están ubicadas en el medio del lado longitudinal recto y se utilizan para colocar el catéter de manera óptima. Estos se sellan pegando el catéter a la superficie adhesiva (2) del CathCup®.


**Consejos**

- Cambie CathCup® cada vez que cuide el catéter.
- Cuanto más cerca esté el embudo, menos afectará al paciente.
- La CathCup® se puede quitar mediante un área no pegajosa (3) al final del área adhesiva (2) aliviado. Afloje la superficie adhesiva (2) del catéter y afloje la CathCup®. Luego retire la superficie adhesiva (2) de la almohadilla eXsorb® o córtela.
- Deseche CathCup® en la basura doméstica o, en cualquier caso, de acuerdo con las pautas del hospital o asilo de ancianos.


**Pasos de la aplicación**

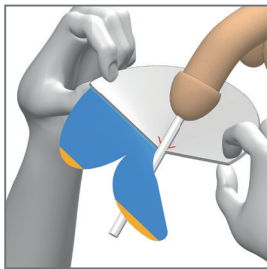

- 1** CathCup® con el lado redondo - apuntando hacia el paciente
- Colóquelo debajo de la extremidad, con el lado liso y recubierto de papel de aluminio de la almohadilla eXsorb® (1) apuntando en dirección opuesta a la extremidad. El catéter debe colocarse en el centro de las perforaciones (4) en la almohadilla eXsorb® (1). El ala grande de la superficie adhesiva (2) está por tanto a la izquierda del catéter desde la perspectiva del usuario. El ala estrecha de la superficie adhesiva se colocará sobre el catéter.

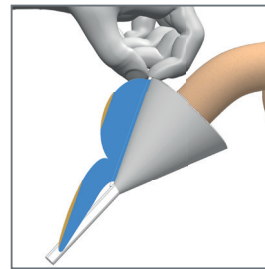

- 2** Junte ambos lados de la almohadilla eXsorb® (1) y superpóngalos con una mano. La parte izquierda de la almohadilla eXsorb® (1), de la que sobresale la superficie adhesiva (2), debe colocarse en la parte superior. El enlace debe estar encerrado en forma de embudo.

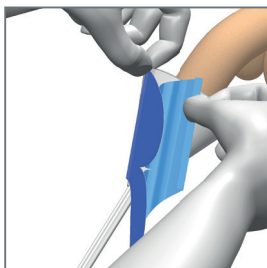

- 3** Mientras el eXsorb® Pad (1) se sujeta con una mano, la película se puede quitar de la superficie adhesiva (2) con la otra mano.



- 4** El ala más grande de la superficie adhesiva (2) está por encima del embudo, que es creado por la almohadilla eXsorb® (1) que fue moldeado, pegado. El ala más pequeña de la superficie adhesiva (2) está pegada de tal manera que las perforaciones (4) en la almohadilla eX-sorb® (1) están selladas y la CathCup® se fija de manera óptima al catéter. Esto evita resbalones y que los líquidos se escurran sobre la funda nórdica.

No reutilizable. Para un solo uso o para usar en un solo paciente durante un solo procedimiento.

Mantener alejado de la luz solar o del calor.

**LATEX** Este producto no contiene látex.

**i** Siga las instrucciones

No utilice el contenido si el embalaje está dañado.

Proteger de la humedad. Almacenar en condiciones frescas y secas.

**NON STERILE** Producto no estéril.

**CE**