

UVENTATM Stent ureteral

Nuevo stent metálico autoexpansible recubierto

**Un salto cuantitativo en la tecnología de stents
para una nueva evolución en terapia paliativa**




DISTRIBUIDO : Presurgy S.L.

C/ Pollensa 2. Las Rozas. 28290. Madrid. TELF: +91 640 20 87 FAX: +91 636 66 10 E-MAIL : pedidos@presurgy.com

 **PRESURGY**

Tecnología exclusiva de UVENTATM

- **Membrana biocompatible de politetrafluoroetileno (PTFE)** que previene el crecimiento tumoral intra-stent y reduce la incrustación
- **Su diseño único en forma de malla** contribuye a una excelente adaptabilidad
- **Construcción en triple capa**
 - La parte exterior se fija al tejido epitelial para prevenir la migración
 - La membrana intermedia de PTFE previene el crecimiento tisular intra-stent
 - La capa interna refuerza la fuerza radial global del stent
- **Su amplitud del diámetro** permite intervenciones adicionales a través del lumen del stent
- **Marcadores radiopacos** claramente identificables para la correcta colocación del stent
- **Los stents premontados** no requieren preparación y reducen tiempos quirúrgicos

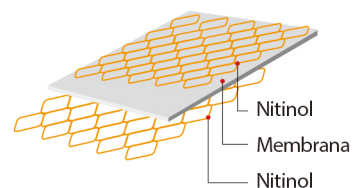

Información para realizar pedidos

Características de los Stent Ureterales de UVENTATM

| Código | Stent | | Delivery | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | Diámetro (mm) | Longitud (cm) | Contorno (Fr) | Longitud útil (cm) |
| UC0706FB | 7 | 6 | 9 | 70 |
| UC0707FB | | 7 | | |
| UC0708FB | | 8 | | |
| UC0709FB | | 9 | | |
| UC0710FB | | 10 | | |
| UC0711FB | | 11 | | |
| UC0712FB | | 12 | | |
| UC0714FB | | 14 | 10 | |
| UC0716FB | | 16 | | |
| UC0718FB | | 18 | | |
| UC0720FB | 20 | | | |
| UC0806FB | 8 | 6 | | |
| UC0807FB | | 7 | | |
| UC0808FB | | 8 | | |
| UC0809FB | | 9 | | |
| UC0810FB | | 10 | | |
| UC0811FB | | 11 | | |
| UC0812FB | | 12 | | |
| UC0814FB | | 14 | 10 | |
| UC0816FB | | 16 | | |
| UC0818FB | | 18 | | |
| UC0820FB | 20 | | | |
| UC1006FB | 10 | 6 | | 9 |
| UC1007FB | | 7 | | |
| UC1008FB | | 8 | | |
| UC1009FB | | 9 | | |
| UC1010FB | | 10 | | |
| UC1011FB | | 11 | | |
| UC1012FB | | 12 | | |
| UC1014FB | | 14 | 10 | |
| UC1016FB | | 16 | | |
| UC1018FB | | 18 | | |
| UC1020FB | 20 | | | |

