


Infla10® Prótesis peneana inflable de 3 componentes

Producto

Rigicon® ofrece Infla10® una Prótesis Peneana Inflable para varones que precisan una intervención quirúrgica para el manejo de la disfunción eréctil. Infla10® está indicado para pacientes que sufren disfunción eréctil orgánica (impotencia) y son candidatos al implante de una prótesis peneana.¹

Infla10® IPP está diseñado con las mejoras características técnicas¹:

- ♂ **Capa HydroShield™**
- ♂ **Bomba-Rapid™**
- ♂ **Reservorio Adaptivo™**
- ♂ **Conectores Easy-Click™**
- ♂ **Extensores connectSecure™**
- ♂ **Cilindros NarrowBody™**

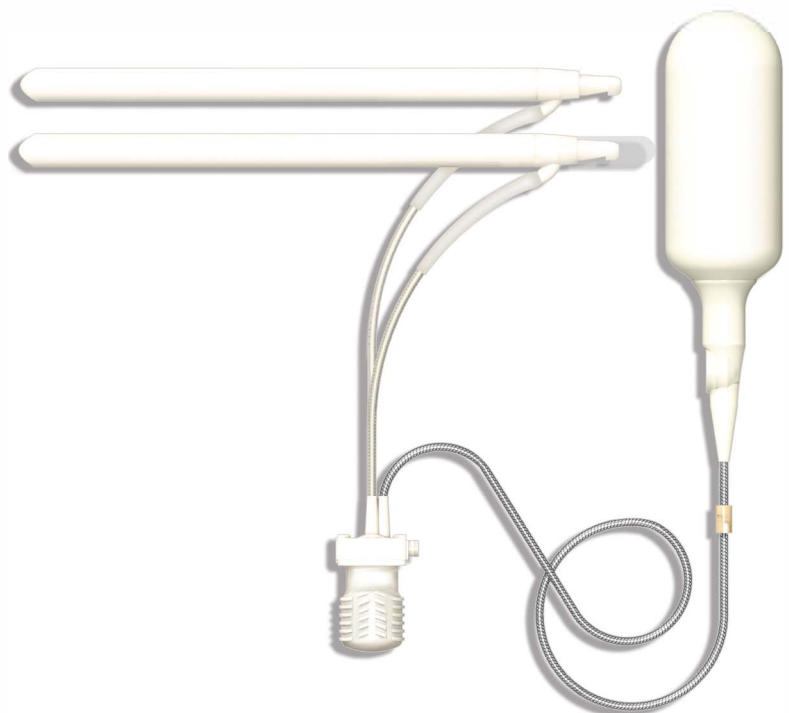

Características & Beneficios

Infla10® está diseñado tras años de experiencia en el campo de la urología; un dispositivo innovador que ofrece seguridad y efectividad a cirujanos y pacientes.

Capa Hidrofílica HydroShield™

Infla10® incorpora una capa hidrofílica en todas las superficies de los componentes externos. La capa hidrofílica le permite utilizar la solución acuosa que desee. La capa hidrofílica en el dispositivo facilita una fuerte y rápida absorción de la solución en el dispositivo y proporciona una implantación más sencilla del dispositivo.

Rapid-Pump™

El mecanismo de nuestra bomba innovadora ofrece gran facilidad y rapidez al paciente para inflar y desinflar el dispositivo.

Reservorio Adaptivo™

El reservorio se adapta fácilmente al lugar de implante ofreciendo confort a los pacientes.

Conectores Easy-Click™

Todos los tubos se conectan fácilmente sin herramientas adicionales de ensamblaje. Un simple click para asegurar las conexiones.

Extensores en punto ConnectSecure™

ConnectSecure™ proporcionan una conexión fiable y segura

Un portfolio de diferentes tamaños para todas las anatomías:

Infla10® Técnica infrapúbica. Modelo estándar		Infla10® Técnica penoscrotal. Modelo estándar	
Código Producto	Largo Prótesis	Código Producto	Largo Prótesis
INF1012-IP	12 cm	INF1012-PS	12 cm
INF1015-IP	15 cm	INF1015-PS	15 cm
INF1018-IP	18 cm	INF1018-PS	18 cm
INF1022-IP	22 cm	INF1022-PS	22 cm
INF1024-IP	24 cm	INF1024-PS	24 cm

Infla10® NarrowBody™ Técnica infrapúbica		Infla10® NarrowBody™ Técnica penoscrotal	
Código Producto	Largo Prótesis	Código Producto	Largo Prótesis
INF1010-NB-IP	10 cm	INF1010-NB-PS	10 cm
INF1012-NB-IP	12 cm	INF1012-NB-PS	12 cm
INF1014-NB-IP	14 cm	INF1014-NB-PS	14 cm
INF1016-NB-IP	16 cm	INF1016-NB-PS	16 cm

Infla10® AX Técnica infrapúbica		Infla10® AX Técnica penoscrotal	
Código Producto	Largo Prótesis	Código Producto	Largo Prótesis
INF1012AX-IP	12 cm	INF1012AX-PS	12 cm
INF1015AX-IP	15 cm	INF1015AX-PS	15 cm
INF1018AX-IP	18 cm	INF1018AX-PS	18 cm
INF1022AX-IP	22 cm	INF1022AX-PS	22 cm
INF1024AX-IP	24 cm	INF1024AX-PS	24 cm

Reservorio código producto y volumen:

INF10RS-65 65 ml
 INF10RS-70 70 ml
 INF10RS-110 110 ml



Reservorio Adaptivo™
70ml-110ml



Reservorio Adaptivo™ 65ml

Extensores en punta: 0.5 cm/ 1 cm/ 1.5 cm/ 2 cm/ 3 cm/ 4 cm/ 5 cm/ 6 cm

Precaución: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a médicos o bajo su autorización.

Antes del uso, revise las instrucciones de uso para obtener una lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles eventos adversos.

Referencias: Instrucciones de uso de la prótesis de pene de tres piezas Rigicon® Infla 10®.

Rigicon, INC.
 2805 Veterans Highway Suite 13,
 Ronkonkoma, NY 11779 United States of
 America
 +1 (888) 202-9790 - www.rigicon.com

Distribuido por:
 Presurgy, SL
 C/Pollensa, 4. Of. 7-8. P12
 28290. Las Rozas. Madrid.
 91 640 20 87 - www.presurgy.com

